

TEST NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ SARS-CoV-2

IMMUNOCHROMATOGRAMIA METODĄ
ZŁOTA KOLOIDALNEGO



DOKŁADNY

Przeciwciała o wysokim poziomie
czystości z dużą dokładnością




SKUTECZNY

Wynik testu jest dostępny
w ciągu 15 minut



WYGODNY

Można go stosować do badania
krwi z palca

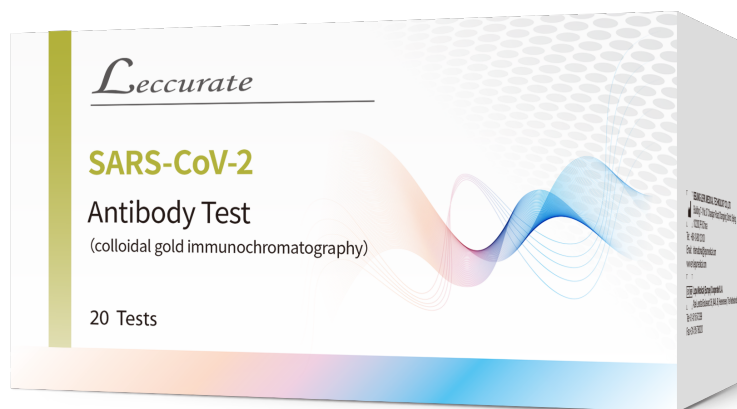



C: linia kontrolna
G: linia wykrywania przeciwciał IgG
M: linia wykrywania przeciwciał IgM
Okienko A: próbka krwi
Okienko B: rozcieńczenie próbki

[Rodzaj próbki] Krew pełna / osocze / surowica

[Objętość próbki] 20ul / 10ul / 10ul


[Czas reakcji] 15 minut

[Wielkość opakowania] 20 testów w pudełku

[Warunki przechowywania] 4°C~ 30°C

[Okres ważności] 12 miesięcy

Test na obecność przeciwciał

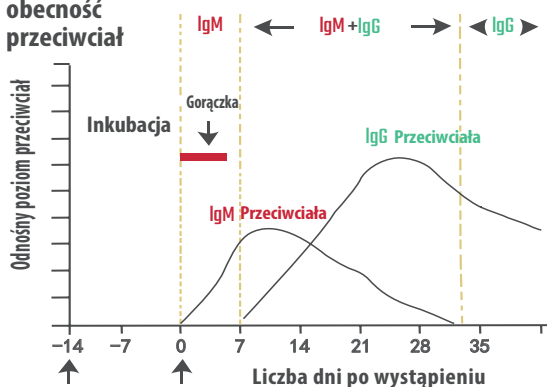


Przeciwciała zaczną być wydzielane po zainfekowaniu wirusem.


Najpierw pojawia się immunoglobulina M (IgM), która jest wczesnym objawem infekcji. Immunoglobulina G (IgG) pojawia się później, wywołując bardziej specyficzną i silniejszą reakcję na obecność wirusa.

Etapy postępowania


Etap 1 Dodaj 20 ul próbki krwi pełnej / 10 ul próbki surowicy lub osocza do okienka A.

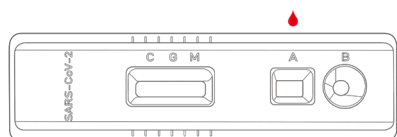

Etap 2 Dodaj dwie krople (około 80 ul) rozcieńczenia próbki do okienka B i rozpocznij pomiar czasu.

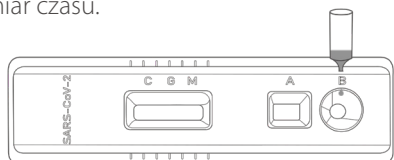

Etap 3 Wyniki testu należy odczytać w ciągu 10-20 minut. Nie należy odczytywać wyników po 20 minutach.

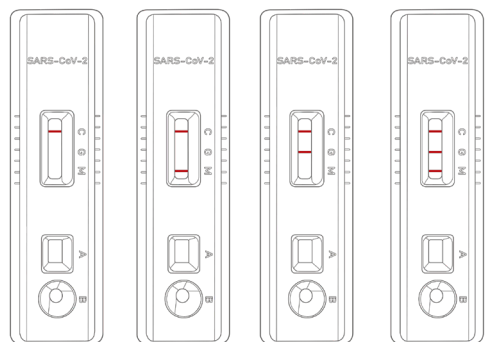

negatywny

IgM
pozytywny


IgG
pozytywny

IgM/IgG
pozytywny

M: Linia wykrywania przeciwciał IgM

G: Linia wykrywania przeciwciał IgG

C: Linia kontrolna

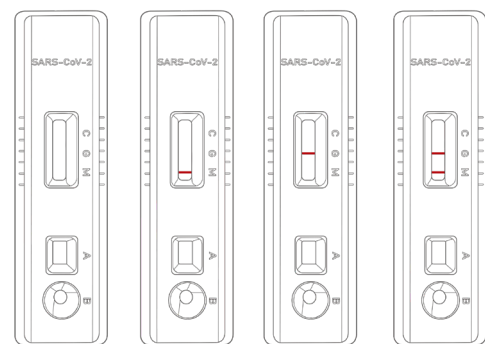

Wynik
nieważny

Wynik
nieważny

Wynik
nieważny

Wynik
nieważny